

マイジンガー コブラ

〈H.P.用〉 / 〈F.G.用〉

歯科用高硬度カーバイドバー / 歯科用高硬度ダイヤモンドバー



Since 1921
100 years of Quality in Dental

マイジンガーコブラは、DLC(ダイヤモンドライクカーボン)コーティングを施したカーバイドバー(H.P用)とダイヤモンドバー(F.G用)です。硬く、優れた耐摩耗性、耐腐食性を持ちます。ダイヤモンドバーは、ダイヤモンド砥粒部の間に設けた螺旋状のスリットが、切削中のバー作業部に水流を巻き込み、ダイヤモンドバー全体を冷却することにより、硬度の高い補綴装置除去時の発熱、ジルコニア除去時に発生する火花の発生を抑制します。

Meisinger

マイジンガー コブラ

形態●HP用=10種(12品目)、FG用=3種(4品目)


シャンク●2種=HP,FG

包装●

HP用:1本(各形態)

FG用:5本1パック(各形態)

〈シャンクの種類〉

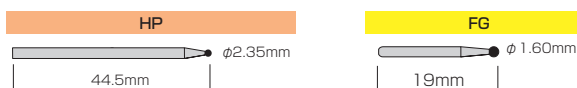

※全長は標準値であり、器具の形態によって全長が異なる場合があります。

マイジンガーコブラ(H.P用)リングカラー
※マイジンガーカーバイドと表記が異なります。

ブラック	極粗目
グリーン	粗目
ブルー	中間粗さ
レッド	細か目

H.P.用

*1 例)060:頭部最大径が6mm *2 最大許容回転数 min⁻¹

タイプ	細か目				中間粗さ						粗目	極粗目
形態番号	B23F	B79F	B79F	B250F	B251F	B23G	B79G	B79G	B250G	B251G	B251H	B251S
シャンク種類/コード ^{*1}	HP 023	HP 040	HP 060	HP 040	HP 060	HP 023	HP 040	HP 060	HP 040	HP 060	HP 060	HP 060
回転数 ^{*2}	50,000	50,000	30,000	50,000	30,000	50,000	50,000	30,000	50,000	30,000	30,000	30,000
カラーコードシステム												
注文コード	89304	89306	89307	89310	89312	89305	89308	89309	89311	89313	89314	89315
用途	<div>模型</div> <div>レジン</div> <div>その他技工用</div>										模型	模型 レジン

F.G.用

*1 例)060:頭部最大径が6mm *2 最大許容回転数 min⁻¹

ダイヤモンド粒子	コース			
形態番号	DMB850	DMB850	DMB852	DMB855
シャンク種類/ISOコード ^{*1}	FG 018	FG 021	FG 018	FG 018
回転数 ^{*2}	250,000	210,000	250,000	250,000
長さ(mm)				
注文コード	89409	89410	89411	89412
推奨除去部位	標準タイプ ・基本的にどの部位でも		ロングタイプ ・上顎切歯 ・犬歯の長い歯冠	ショートタイプ ・最後臼歯 ・クリアランスが少ない部位
用途	クラウン除去 (ジルコニア、セラミックス)			

関連製品



フィルム状アルミナ研磨ストリップ

RSスプレー

スチール製器具類のオートクレープ滅菌中及び滅菌後の錆を防ぐための防錆スプレーです。

包装●1本(200mL)

注文コード 89278

歯科技工用カーバイド切削器具/歯科用ダイヤモンドバー
マイジンガーコブラ 一般医療機器 13B1X00155000275

※写真は原寸ではありません。
※掲載情報とジーシー研究所のデータは、2025年11月現在のものです。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。
※本パンフレットに記載されている会社名、製品名称等は各社の商標または登録商標です。

ご使用に際しては、必ず製品の電子添文をお読みください。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 株式会社 ジーシー
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区蓮沼町76番1号

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)
<https://www.gc.dental/japan/>

支店
●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333
営業所
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722
●東北(022)785-8040 ●九州(092)441-1286

iPhoneもAndroidも



どちらもこちらのQRでOK!

ジーシー
公式アプリ

