

マイジנגガーコブラ (FG 用)

歯科用高硬度ダイヤモンドバー



Since 1921

100 years of Quality in Dental

マイジングガーリムーバブルキット

歯科用除去キット

ジルコニア補綴物の除去に最適な

ダイヤモンドライクカーボン

DLC コーティング ダイヤモンドバー

マイジングガーコブラ (FG 用)



ジルコニア、セラミックス、メタル等

あらゆる補綴物の除去に対応

マイジングガー リムーバブルキット

マイジンガーコブラ (FG用)

ジルコニア補綴物の除去に！

DLC コーティングによる 高い切削力・耐久性

DLC (ダイヤモンドライクカーボン) コーティングにより、硬度に優れ砥粒が剥がれにくいダイヤモンドバーを実現しました。従来のダイヤモンドバーにはない高い切削力と耐久性を有しています。

発熱しにくいスリット構造

ダイヤモンド砥粒部の間に設けた螺旋状のスリットが、切削中のバー作業部に水流を巻き込み、ダイヤモンドバー全体を冷却します。これにより、硬度の高い補綴物除去時の発熱、ジルコニア除去時に発生する火花の発生を抑制します。



形態番号	DMB850	DMB850	DMB852	DMB855
シャング種類 ISOコード	FG 018	FG 021	FG 018	FG 018
最大許容回転数/分	250,000	210,000	250,000	250,000
長さ [mm]	8.5	8.5	10.0	6.5
注文コード	89409	89410	89411	89412
用途	クラウン (ジルコニア、セラミックス) 除去			
推奨除去部位	標準タイプ ・基本的などの部位でも	ロングタイプ ・上顎切歯 ・犬歯の長い歯冠	ショートタイプ ・最後臼歯 ・クリアランスが少ない部位	
ダイヤモンド粒子	コース (粗目)			

形態 ● 4種
シャング ● 1種=FG*
包装 ● 5本 1パック

歯科技工用カーバイド切削器具 / 歯科用ダイヤモンドバー
一般医療機器 13B1X00155000275

*マイジンガーコブラのシャングには FG の他に HP (カーバイドバー) もあります。


歯科用除去キット

マイジンガーリムーバルキット

切削性、耐久性に優れたダイヤモンドバー「マイジンガーコブラ」4形態「DMB850 (FG 018 / FG 021)」「DMB852 (FG 018)」「DMB855 (FG 018)」に加え、ストレート形状のダイヤモンドバー「DMZ838L (FG 014)」とカーバイドバー「HM23RX (FG 012)」を1セットにしたキットです。このキットでジルコニアはもちろんセラミックス、メタル等、あらゆる補綴物の除去に幅広く対応することができます。

形態番号	DMB850	DMB850	DMB852	DMB855	DMZ838L	HM23RX
シャング種類 ISOコード	FG 018	FG 021	FG 018	FG 018	FG 014	FG 012
最大許容回転数/分	250,000	210,000	250,000	250,000	300,000	160,000
長さ [mm]	8.5	8.5	10.0	6.5	6.0	4.1
注文コード	キット 89408					
	89409	89410	89411	89412	81985	89198
用途	クラウン (ジルコニア、セラミックス) 除去					メタル除去
ダイヤモンド粒子	コース (粗目)				ミディアム	— (カーバイドバー)

【マイジンガーリムーバルキット構成】

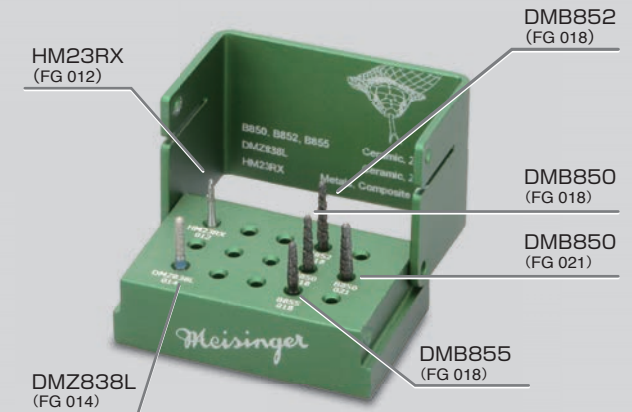

形態 ● 6種 =
DMB850 (FG 018)、DMB850 (FG 021)、DMB852 (FG 018)
DMB855 (FG 018)、DMZ838L (FG 014)、HM23RX (FG 012)
シャング ● 1種=FG
包装 ● キット1函
キット注文コード: 89408

歯科用ダイヤモンドバー / 歯科用カーバイドバー / 歯科技工用カーバイド切削器具
一般医療機器 13B1X00155000300

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

*掲載情報の参考データは2023年6月現在のものです。
*製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
*色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **株式会社 ジーシー**
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区蓮沼町7番1号

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祝日を除く)
<https://www.gc.dental/japan/>

支店
●東京 (03)3813-5751 ●大阪 (06)4790-7333
営業所
●北海道 (011)729-2130 ●名古屋 (052)757-5722
●東北 (022)207-3370 ●九州 (092)441-1286

iPhoneもAndroidも



ジーシー
公式アプリ



どちらもコチラのQRでOK!

推奨OSバージョンはiOS:14.0以上、Android:10.0以上です。