

マイジンガーコブラ (FG 用)

歯科用高硬度ダイヤモンドバー

マイジンガーリムーバルキット

歯科用除去キット



Since 1921
100 years of Quality in Dental

ジルコニア補綴物の除去に最適な

ダイヤモンドライクカーボン

DLC コーティング ダイヤモンドバー

マイジンガーコブラ (FG 用)



ジルコニア、セラミックス、メタル等
あらゆる補綴物の除去に対応

マイジンガー リムーバルキット

マイジンガーコブラ (FG 用)

ジルコニア補綴物の除去に！

DLC コーティングによる 高い切削力・耐久性

DLC (ダイヤモンドライクカーボン) コーティングにより、硬度に優れ砥粒が剥がれにくいダイヤモンドバーを実現しました。従来のダイヤモンドバーにはない高い切削力と耐久性を有しています。

発熱しにくいスリット構造

ダイヤモンド砥粒部の間に設けた螺旋状のスリットが、切削中のバー作業部に水流を巻き込み、ダイヤモンドバー全体を冷却します。これにより、硬度の高い補綴物除去時の発熱、ジルコニア除去時に発生する火花の発生を抑制します。

形態番号	DMB850	DMB850	DMB852	DMB855
シャンク種類 ISOコード	FG 018	FG 021	FG 018	FG 018
最大許容 回転数 / 分	250,000	210,000	250,000	250,000
長さ [mm]	8.5	8.5	10.0	6.5
注文コード	89409	89410	89411	89412
用途	クラウン (ジルコニア、セラミックス) 除去			
推奨 除去 部位	標準タイプ ・基本的にどの部位でも		ロングタイプ ・上顎切歯 ・犬歯の長い 歯冠	ショートタイプ ・最後臼歯 ・クリアランス が少ない部位
ダイヤモンド粒子	コース (粗目)			

形態 ● 4 種

シャンク ● 1 種 = FG*

包装 ● 5 本 1 パック (各形態)

歯科技工用カーバイド切削器具 / 歯科用ダイヤモンドバー

一般医療機器 13B1X00155000275

※マイジンガーコブラのシャンクには FG の他に HP (カーバイドバー) もあります。


歯科用除去キット

マイジンガーリムーバルキット

切削性、耐久性に優れたダイヤモンドバー「マイジンガーコブラ」4 形態「DMB850 (FG 018 / FG 021)」「DMB852 (FG 018)」「DMB855 (FG 018)」に加え、ストレート形状のダイヤモンドバー「DMZ838L (FG 014)」とカーバイドバー「HM23RX (FG 012)」を 1 セットにしたキットです。このキットでジルコニアはもちろんセラミックス、メタル等、あらゆる補綴物の除去に幅広く対応することができます。

形態番号	DMB850	DMB850	DMB852	DMB855	DMZ838L	HM23RX
シャンク種類 ISOコード	FG 018	FG 021	FG 018	FG 018	FG 014	FG 012
最大許容 回転数 / 分	250,000	210,000	250,000	250,000	300,000	160,000
長さ [mm]	8.5	8.5	10.0	6.5	6.0	4.1
注文コード	89408					
キット	89408					
単品	89409	89410	89411	89412	81985	89198
用途	クラウン (ジルコニア、セラミックス) 除去					メタル 除去
ダイヤモンド粒子	コース (粗目)				ミディアム	— (カーバイドバー)

【マイジンガーリムーバルキット構成】

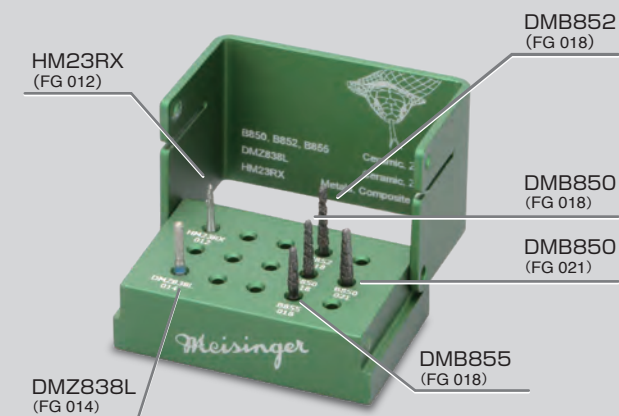

形態 ● 6 種 =

DMB850 (FG 018)、DMB850 (FG 021)、DMB852 (FG 018)

DMB855 (FG 018)、DMZ838L (FG 014)、HM23RX (FG 012)

シャンク ● 1 種 = FG

包装 ● キット 1 函 (各形態 1 本)

キット注文コード: 89408

歯科用ダイヤモンドバー / 歯科用カーバイドバー / 歯科技工用カーバイド切削器具

一般医療機器 13B1X00155000300

※写真は原寸ではありません。

※掲載情報とジーシー研究所のデータは、2025 年 6 月現在のものです。

※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。

※本パンフレットに記載されている会社名、製品名称等は各社の商標または登録商標です。

ご使用に際しては、必ず製品の電子添文をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **株式会社 ジーシー**
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区蓮沼町76番1号

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祝日を除く)
<https://www.gc.dental/japan/>

支 店
●東 京 (03)3813-5751 ●大 阪 (06)4790-7333
営業所
●北海道 (011) 729-2130 ●名古屋 (052) 757-5722
●東 北 (022) 785-8040 ●九 州 (092) 441-1286

iPhone も Android も

App Store

Google Play

どちらもコチラのQRでOK!

ジーシー
公式アプリ

