

# マイジューンガーポリッシャー

歯科用ゴム製研磨材

FP9742H

FP9752H

仕上げに差が出る、この粗さ  
ジルコニア研磨にプラスワン



## マイジンガーポリリッシャー

| 形態番号               | FP9742H | FP9752H |
|--------------------|---------|---------|
| シャンク種類/<br>ISOコード* | HP 040  | HP 170  |
| 回転数*               | 20,000  | 20,000  |
| 包装                 | 1本      | 1本      |
| 注文コード              | 82048   | 82049   |

\*1 例)040:頭部最大径が4.0mm \*2 最大許容回転数/分

マイジンガーポリリッシャー 一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 13B1X00155000277

適度な切削力で作業効率と仕上がりの美しさを両立させるジルコニア研磨バー

粗い面を均一に仕上げることができ、マージンのオフセット調整やバイトポイントの調整などに有用です。このバーを今までの研磨システムにプラスすることで「調整後の細かな傷が除去できない」「仕上げまでに時間がかかる」「マージン等の薄い部分を削りすぎてしまう」などジルコニア研磨時のストレスを低減。大きな傷を残すことなく効率的に、研磨仕上げでもステイン仕上げでも次の作業に繋げることができます。



FP9742H FP9752H

形態修正・咬合調整に適した粗さで効率的に作業可能

火花が起きにくく発熱によるダメージを軽減

チェアサイドやラボサイドの研磨に使える2形態のラインナップ


Meisinger

FP9742H + プラスワン

写真提供: 株式会社リープ・セラミック・アーツ 伊藤電馬 DT



〈各ポリリッシャー研磨面の比較〉

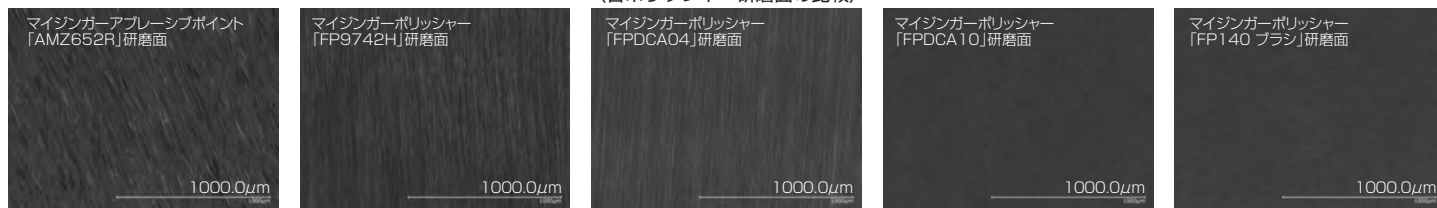

SEM 画像: ジーシー測定

### 関連製品

歯科用ゴム製研磨材

マイジンガー  
アブレーションポイント

| 形態番号               | AMZ652R |
|--------------------|---------|
| シャンク種類/<br>ISOコード* | HP 035  |
| 回転数*               | 20,000  |
| 包装                 | 1本      |
| 注文コード              | 89319   |

歯科技工用アブレーション器具  
マイジンガー  
アブレーションポイント  
一般医療機器  
13B1X00155000278

歯科用ゴム製研磨材

マイジンガーポリリッシャー

| プレポリッシング |         | ツヤ出し    |         | 仕上げ       |
|----------|---------|---------|---------|-----------|
| 形態番号     | ISOコード* | 形態番号    | ISOコード* | 形態番号      |
| FPDCA04  | HP 040  | FPDCA10 | HP 040  | FP140 ブラシ |
| FPDCA06  | HP 170  | FPDCA12 | HP 170  | HP 220    |
| 20,000   | 20,000  | 20,000  | 20,000  | 15,000    |
| 82181    | 82179   | 82182   | 82180   | 89401     |

歯科用ゴム製研磨材  
マイジンガーポリリッシャー  
一般医療機器  
13B1X00155000277

\*1 例)040:頭部最大径が4.0mm \*2 最大許容回転数/分

歯科用研磨キット

マイジンガーラスターキット  
ジルコニア ラボ用 6本入



包装●1 函セット(6本入):  
マイジンガーアブレーションポイント各1本  
(AM9736H(HP) 150, AMZ652R(HP)035)  
マイジンガーポリリッシャー各1本  
(FPDCA04(HP)040, FPDCA06(HP) 170,  
FPDCA10(HP)040, FPDCA12(HP) 170)

注文コード 89275

歯科用ゴム製研磨材 マイジンガーラスターキット  
一般医療機器 13B1X00155000279

ダイヤモンドポリリッシュペースト

ジーシー  
セラシャインポリリッシャー



包装●1 函:ペースト(20g)1個

歯科用研磨器材  
ジーシー セラシャインポリリッシャー  
一般医療機器  
28B3X10005000013  
製造販売元 株式会社 マシンツール中央

※写真は原寸ではありません。  
※掲載情報とジーシー研究所のデータは、2025年6月現在のものです。  
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。  
※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。  
※本パンフレットに記載されている会社名、製品名称等は各社の商標または登録商標です。

ご使用に際しては、必ず製品の電子添文をお読みください。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 株式会社 ジーシー  
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区蓮沼町76番1号

カスタマーサービスセンター  
お客様窓口 ☎0120-416480  
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)  
<https://www.gc.dental/japan/>

支店  
●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333  
営業所  
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722  
●東北(022)785-8040 ●九州(092)441-1286

iPhoneもAndroidも  
App Store からダウンロード  
Google Play でお申し込み  
どちらもコチラのQRでOK!

ジーシー  
公式アプリ

