


硬質研磨材・ステンレス製



ニューメタルストリップ

薄さを極めたニュータイプ
コシのあるしなやかさが
隣接面修復の審美的仕上げます

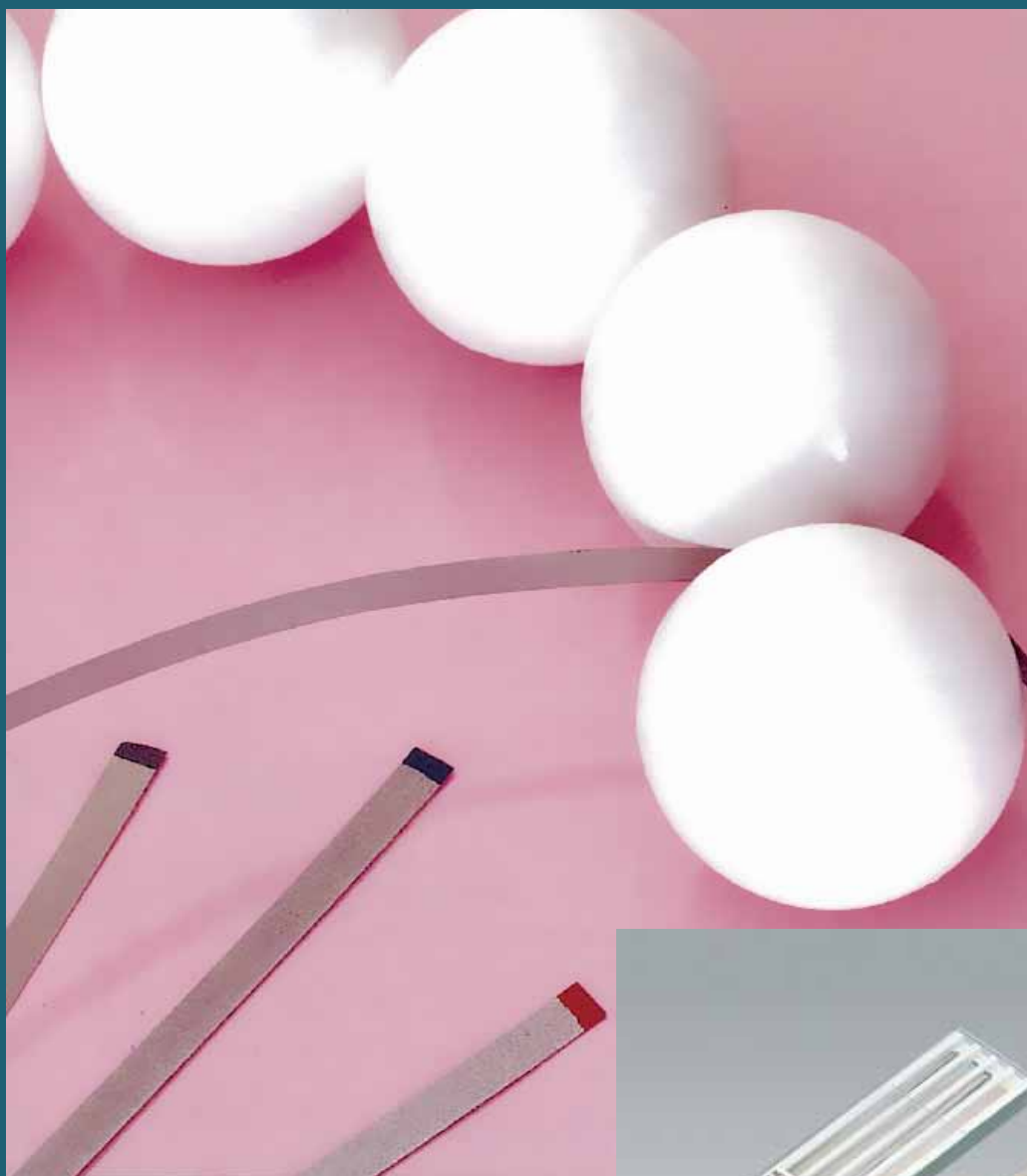

歯間離間をほとんど必要としない、極めて薄い研磨材 ニューメタルストリップ

いちだんと薄く改良した18-8ステンレス箔に、微細なアランダム砥粒を電着法で確実に固定した「ニューメタルストリップ」。荒けずり用から最終仕上げ用まで4種類が揃っています。これまでにない薄さとしなやかさを持ち、隣接面のカーブに自在に合せられるのが特徴。しかも、腰が強く、歯間への挿入がスムーズで研磨力も強く、隣接面充填物の効率の良い形態修正・研磨作業が行えます。また歯間分離や支台歯形成時にも有効に使用できます。




1000メッシュでは、わずか0.05ミリの薄さ。

基材であるステンレス箔をいちだんと薄くした「ニューメタルストリップ」。とくに最終仕上げ用の1000メッシュは、砥粒部分も含め、厚きはわずか0.05ミリ。これまでにない薄さを実現しました。歯間離間をほとんど必要とせずに挿入でき、隣接面のより自然な形態修正と最終研磨が効率的に行えます。

耐久性に優れたステンレス箔を使用。

「ニューメタルストリップは、耐蝕性に優れた18-8ステンレス箔が基材。薬液や煮沸消毒にも強く、清掃・保存が簡単に行えます。また耐水性も抜群。乾燥や湿気による剥離、伸びなどの心配もなく、常に安定した研磨力を発揮します。

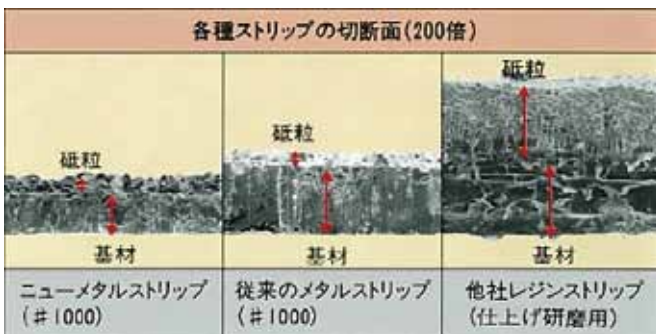

- 種類= 12種= 粒度4種 (#200赤、#300青、#600緑、#1000黄) ×幅3種 (A: 2.6mm、B: 3.3mm、C: 4.0mm) 長さはすべて133mm
- 包装= 粒度別1函=12枚 (A、B、C各4枚入) 組合せ1函=12枚 (粒度別4種類×幅A、B、C3種類)

※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。
※掲載の価格とジーシー研究所測定値の参考データは、2012年5月現在のものです。
※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 株式会社 ジーシーデンタルプロダクツ

東京都板橋区蓮沼町76-1

愛知県春日井市鳥居松町2-285

DIC (デンタルインフォメーションセンター)

お客様窓口 ☎0120-416480

受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祭日を除く)

<http://www.gcdental.co.jp>

支店

●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333

営業所

●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722

●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286