

# 手術顕微鏡 OP-Dent イオムレガロオプション



## ハイコストパフォーマンス & ハイスタンダードな マイクロスコープ搭載の「イオムレガロ」

オプトミック社製「手術顕微鏡OP-Dent※」はユニット搭載型に独自のバランスアームを採用することで、コンパクトな収納を実現しました。

観察部位との焦点調整はユニットの高さ(垂直昇降)が2mm単位で調整可能な「マイクロスコープモード機能」と「パワーヘッドレスト※」を組み合わせることで、より合わせやすくなります。精密な診断が可能となり、診療のクオリティが向上します。

※オプション

### ◆ 総合倍率

OP-Dent	3.5x	5.5x	8.5x	14.0x	21.0x
---------	------	------	------	-------	-------

独自のレンズ配合によりクリアな視野を実現



## 軽量・コンパクトなシザーズアームは 位置決めから収納時までスムーズに稼働




診療時



収納時

コンパクトながら十分な可動範囲のあるシザーズアームを採用。観察部位にアクセスしやすい、ストレスフリーな操作感です。

## 口腔内の使用状況に対応するLED光源と フィルタ機能 (最大50,000Luxまで)

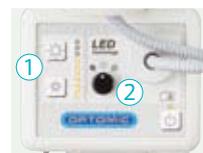

- ① LEDの光量はパネルスイッチで調整可能。設定レベルがわかりやすいインジケータ表示です。
- ② アンバーフィルタ・フィルタなし・自然光フィルタの3つの切替が可能です。

## 口腔内情報を共有できる専用のFHDカメラ(オプション)



1080Pの解像度があり、外部機器と接続することで映像の表示や録画も可能。口腔内情報をドクターとアシスタントで共有でき、患者さんへのインフォームドコンセントも円滑に行えます。

※ カメラ本体には録画機能がありません。録画には外部録画装置が別途必要です。  
※ 解像度1080P(1920×1080)の出力に対応する液晶モニタが別途必要です。

### 各キーで簡単操作


- ① 映像フリーズキー  
映像を一時的に静止することができます。
- ② ホワイトバランス調整キー
- ③ 映像出力ON/OFFキー  
マイクロを使用中、一時的に映像を表示しないことができます。



### カメラの接続方法

HDMIとUSB3.0の接続により画像をエクスポートすることが可能です。

#### ■HDMI接続例

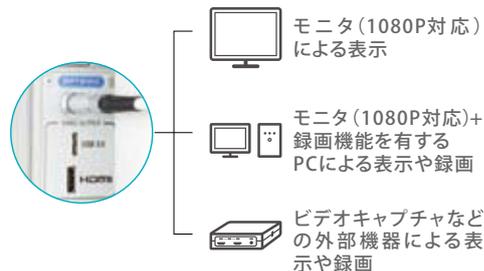

### 手術顕微鏡 OP-Dent

イオムレガロ対応タイプ:

スライドデリバリアタイプ、  
オーバーアームタイプ、  
カートタイプ

電源: AC100V 50/60Hz

電源入力: 180W

総合倍率: 3.5倍/5.5倍/8.5倍/14.0倍/21.0倍


総重量: 20kg

包装●OP-Dentユニットマウント仕様/  
ユニットマウントカメラ付仕様

オプション●FHDカメラ

\*手術顕微鏡は液晶モニタアーム、ティッシュケース、オペレーティングライト(自動昇降ユニットタイプ)との併設はできません。

寸法(1/50縮寸)単位:(mm)

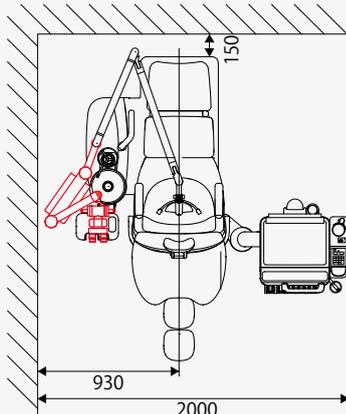

イオムレガロ 管理医療機器 特定保守管理医療機器 223AKBZX00028000

手術顕微鏡OP-Dent 一般医療機器 特定保守管理医療機器 13B1X001550000267

※掲載内容は2017年7月現在のものです。 ※製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

※モニタ画像は、ハメ込み合成のため実際とは若干異なります。 ※写真にはオプションが含まれています。

※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。 ※記載されている会社名・製品名等は各社の登録商標または商標です。

※イオムレガロについての詳細な情報はイオムレガロ HP <http://www.gcdental.co.jp/regalo/>または/パンフレットをご覧ください。

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **株式会社 ジーシー**  
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区蓮沼町76番1号

DIC(デンタルインフォメーションセンター)

お客様窓口 ☎0120-416480

受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祭日を除く)

<http://www.gcdental.co.jp>

支店

●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333

営業所

●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722

●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286