

# Primescan Connect

株式会社 ジーシー



快適なスキャン体験を、日々の診療に



光学印象(口腔内スキャナー)対応  
CAD/CAMインレー(保険適用)

訪問診療にも

石膏模型の  
管理と手間を削減

リーズナブルに導入  
2台目の選択肢として

## Primescan Connectで スムーズに、スピーディーに、簡単にスキャン

正確なスキャンデータは、すべてのデジタルワークフローの出発点。その精度が、歯科技工所で仕上がる修復物の品質にも大きく左右します。Primescan Connectはその精度に加え、短時間でスムーズにデータを容易に取得できるスピード性能により、日々の診療を効率的にサポートします。

### ACCURACY

#### あらゆる症例に 対応できる精度

カメラ内にあるダイナミックレンズによって1秒間に10往復上下に稼働。  
20mmの深度のインプラント症例などでもシャープに再現します。

### SPEED

#### スピーディーなスキャンで 患者さんの負担軽減に配慮


カメラ内の“インテリジェントプロセッシング”で1秒間に15億回を超えるコントラスト画像を処理。スムーズな画像処理でスピーディーなスキャンを実現し患者さんの負担を減らします。

### EASY


#### シンプルな操作 簡単にスキャン

幅広いウィンドウによって映し出されたものすべてが取り込まれます。傾斜をさせなくとも5°から85°までの角度をサポートし、誰でも簡単に広範囲なスキャンが可能です。

## スキャンをより快適にサポート!

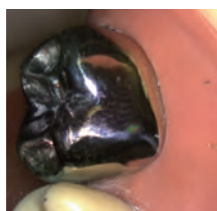

スキャンライブ画像

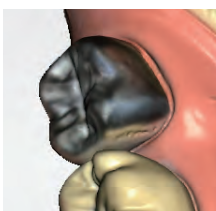

スキャン3Dモデル画像

金属等の表面もストレスなく  
スムーズにスキャン



スキャン粘膜排除前




スキャン粘膜排除後

スキャン中に頬粘膜など  
修復に不要なエリアを認識し除去



ディスプレイスリーブ

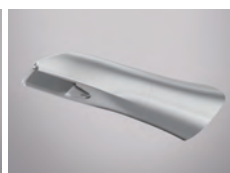

オートクレープ対応スリーブ

選択できる  
ハイジーンコンセプトスリーブ

# DS Core<sup>®</sup>



## DS Coreでタイムリーにラボと連携 スムーズなコミュニケーション

DS Coreは、歯科医院、ラボ、患者さんをつなぐデジタルワークをシンプルにするクラウドプラットフォームです。  
Primescan Connectで撮影したデータや注文、サービス等を一元管理し、ラボとの連携をよりスムーズに、症例ごとに簡単にコミュニケーションを取ることが出来ます。



1



### スキャン

Primescan Connectで口腔内をスピーディーに正確にスキャンします。  
スキャン完了後、スキャンデータは自動的にDS Coreへアップロードされます。

2



### 送信

DS Core上で3D模型を確認したら、必要事項を入力し提携ラボへ送信します。  
スキャンデータだけでなく、PDF・動画・写真などあらゆるデータを添付することも可能です。

3



### ラボサイドの受け取り

受け取ったスキャンデータは即座に症例の確認ができ、チャット機能で効率的にフィードバック可能です。ラボの設計ソフトはデンツプライシロナのinLabソフトウェアだけでなくSTL、PLY、またはExocadファイルとしてダウンロードができ、取引のあるラボの設計ソフトに柔軟に対応します。

## Primescan Connect & DS Coreのメリット

### 診療項目の拡大に対応

Primescan Connectは、保険・自費を問わず、精度を重視したスキャンが求められる診療に幅広くご利用いただけます。

### 模型の作製管理が不要

石膏模型の保管の為にスペースや印象材への石膏注入作業はデジタルに置き換わり、Primescan Connectでの訪問診療や院内での印象採得も一元管理。作業やスペースがスリム化されます。

### 患者さんの満足度向上

スキャンデータが送られたと同時にラボ側で確認。症例ごとにチャットでコミュニケーションがとれ再形成や再印象もその場で判断。再印象による患者さんの再来院の負担軽減に役立ちます。

### アナログ印象とPrimescan connectとの比較

アナログ印象	Primescan connect
石膏模型を作製・郵送	スキャンデータを即時クラウド送信
ラボへ模型が届き確認するまでに数日	その場で確認
模型保管・管理の負担	クラウド保存で管理可能
再印象による再来院	その場で再印象

### 株式会社 ジーシー

支店 ●東京 (03) 3813-5751  
●大阪 (06) 4790-7333  
営業所 ●北海道 (011) 729-2130  
●東北 (022) 785-8040  
●名古屋 (052) 757-5722  
●九州 (092) 441-1286

※表面及び上記の情報は、デンツプライシロナ（株）のパンフレットに基づく情報です。  
※掲載内容は2025年12月現在の情報です。※製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。  
※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。※ソフトウェア画面はハメ込み合成のため実際とは若干異なります。  
※会社名、製品名称等は各社の商標または登録商標です。

一般的名称：チェアサイド型歯科用コンピュータ支援設計・製造ユニット（歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット、デジタル印象採得装置）  
販売名：セレック プライムスキャン AC 承認番号：30100BZX00044000 管理医療機器 特定保守管理医療機器