

# プローブ

包装●1本


歯周ポケットプローブ プローブ  
一般医療機器 13B1X00155000049



# エクスプローラー



## 関連製品

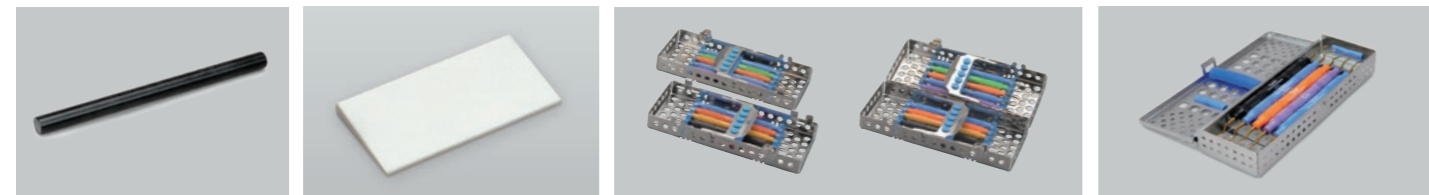

**テストスティック**  
包装● 1本入/6本入

**シャープニングストーン**  
包装● 1函:1個  
※オートクレーブ滅菌(140℃以下)、薬液消毒可能  
※XPシリーズ・チタンインスツルメントはシャープニング不要

**インスツルメントカセット10本用**  
種類●分割式、蝶番式  
包装●1函:1個  
※製品にインスツルメントは含まれておりません。  
**別売**  
インスツルメントカセット10本用 交換用ラバー  
包装●1セット:6個

**AEインスツルメント用カセット**  
包装● 1函:1個  
※インスツルメントを5本収納できます。  
※製品にインスツルメントは含まれておりません。

インスツルメントは、刃部の損傷や破折を防ぐため、カセットに入れて洗浄(超音波・ウォッシャー・ディスインフェクター)、滅菌を行ってください。

※掲載情報は2023年7月現在のものです。  
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。  
※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。  
※会社名、製品名称等は各社の商標または登録商標です。

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **株式会社 ジーシー**  
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区蓮沼町76番1号

カスタマーサービスセンター  
お客様窓口 ☎0120-416480  
受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祝日を除く)  
<https://www.gc.dental/japan/>

支店  
●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333  
営業所  
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722  
●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286

iPhoneもAndroidも  
App Store Google Play  
どちらもコチラのQRでOK!  
推奨OSバージョンはiOS:14.0以上、Android:10.0以上です。

ジーシー公式アプリ

KZ009M2307

# アメリカンイーグル 診査/歯周治療用

ハンドインスツルメント



Since 1921  
100 years of Quality in Dental



材質

ステンレススチール

XP

XP Pro Thin

## TALON TOUGH



「硬く鋭い鷲の爪」の意味を持つ、熱処理とアイステンパリングを施した特殊ステンレス合金です。シャープな切れ味が持続し、高いレベルの耐久性と耐蝕性を実現しました。

## XPシリーズ



**ブレードの耐久性試験**  
試験方法: 牛歯のエナメル質に100gの圧をかけて25mm幅でストローク。

ステンレススチール	XP
1,500回のストローク	15,000回のストローク

standard instrument vs XP series instrument

※アメリカイーグル社データ

プラズマフュージョン(特殊加工)により、ダイヤモンドのような硬い表面を持ち、耐久性がアップしました。これにより、シャープニング直後のような切れ味が持続するため、**シャープニングフリー**となっています。  
※XPシリーズはシャープニングを行うことができません。

ブレード幅



10%減



10%減



ハンドル




**SURE GRIP HANDLE**  
ハンドルには、フラットな3本リングとファインカットが施されており、濡れたグローブで握っても滑りにくく、正確な作業を行います。




※ Xハンドルは形態別に色調が決まっています。

## 3つの形状

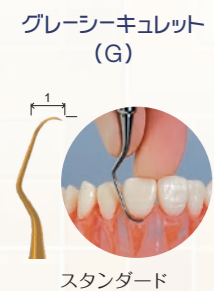

## 開口量が少ないケースには

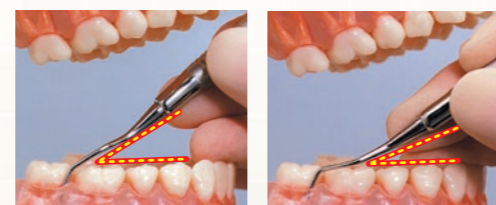


グレイシーキュレット G11-12・G13-14のシャンクの角度を強くし、開口量が少なく挿入が制限されてしまう臼歯部でも操作がしやすいG15-16・G17-18をラインナップしています。

## 使用部位

### キュレットスケーラー


- 前歯部 00-0/1-2/3-4/5-6
- 臼歯部 7-8/9-10
- 臼歯部(近心) 11-12/15-16
- 臼歯部(遠心) 13-14/17-18

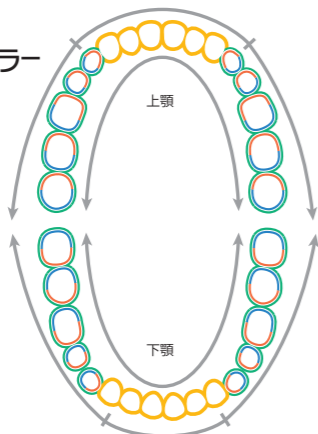

### シックルスケーラー

- 前歯部 H5-33/H6-7/J4-U5
- 臼歯部 204S
- 臼歯部(遠心) 204SD
- 前歯部・臼歯部共用 M23/ブラックジャック

※色の表記はハンドルの色調とは異なります。

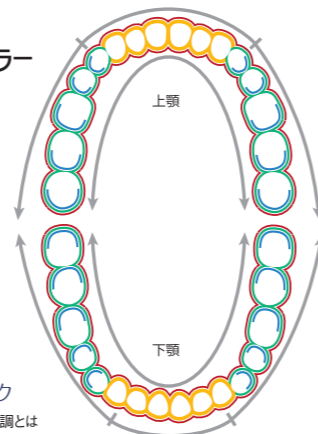

### 包装

- ステンレススチール S L 1本
- X 1本
- XP X 1本

歯周キュレット グレイシー キュレット  
一般医療機器 13B1X00155000071  
歯周キュレット XP グレイシー キュレット  
一般医療機器 13B1X00155000254

### 〈製品コード〉

ブレードタイプ	ステンレススチール			XP
	S	L	X	X
G1-2	0209B2140100	0209B2130100	0226B1150100	0234B0810010
G3-4	0209B2140150	0209B2130150	0226B1150150	0234B0810020
G5-6	0209B2140200	0209B2130200	0226B1150200	0234B0810030
G7-8	-	0209B2130250	0226B1150250	0234B0810040
G9-10	0209B2140300	0209B2130300	0226B1150300	0234B0810050
G11-12	-	0209B2130350	0226B1150350	0234B0810060
G13-14	0209B2140450	0209B2130450	0226B1150450	0234B0810090
G15-16	0209B2140500	0209B2130500	0226B1150500	0234B0810100
G17-18	0209B2140600	0209B2130600	0226B1150600	0234B0810110



ステンレススチール X

[S L X] [X]



[S L X] [X]



[S L X] [X]



[L X] [X]




[S L X] [X]



[L X] [X]



[S L X] [X]

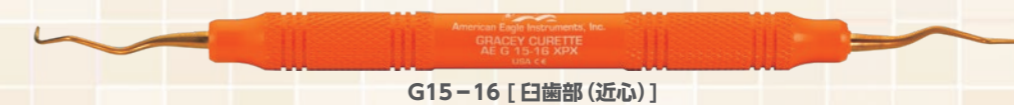

[S L X] [X]



[S L X] [X]

# グレイシーアクセス

## 包装●


- ステンレススチール **S** **L** 1本
- X** 1本
- XP **X** 1本
- XP Pro Thin **X** 1本

歯周用キュレット グレイシー アクセス  
 一般医療機器 13B1X0015500073  
 歯周用キュレット XP グレイシー アクセス  
 一般医療機器 13B1X00155000255

## 〈製品コード〉

ブレードタイプ	ステンレススチール			XP	XP Pro Thin
ハンドルタイプ	S	L	X	X	X (XP Pro Thin タイプ)
GA00-0	0209B2160100	0209B2150100	0226B1160100	0234B0820010	-
GA1-2	0209B2160150	0209B2150150	0226B1160150	0234B0820020	0138B1330010
GA3-4	0209B2160200	0209B2150200	0226B1160200	0234B0820030	-
GA5-6	0209B2160250	0209B2150250	0226B1160250	0234B0820040	-
GA7-8	0209B2160300	0209B2150300	0226B1160300	0234B0820050	0138B1330020
GA11-12	-	0209B2150350	0226B1160350	0234B0820060	-
GA13-14	0209B2160400	0209B2150400	0226B1160400	0234B0820070	0138B1330030
GA15-16	-	0209B2150450	0226B1160450	0234B0820080	0138B1330040

ステンレススチール **X** XP **X** XP Pro Thin

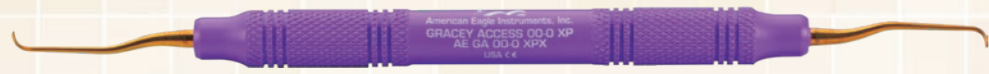

GA00-0 [前歯部]

[S L X][X][ - ]



GA1-2 [前歯部]

[S L X][X][X]



GA3-4 [前歯部]

[S L X][X][ - ]



GA5-6 [前歯部]

[S L X][X][ - ]



GA7-8 [臼歯部]

[S L X][X][X]



GA11-12 [臼歯部 (近心)]

[ - L X][X][ - ]



GA13-14 [臼歯部 (遠心)]

[S L X][X][X]



GA15-16 [臼歯部 (近心)]

[ - L X][X][X]



GA00-0

小さなブレードとまっすぐな第一シャンクにより、深く狭い下顎前歯部根面や、垂直性の歯周ポケットでも操作しやすくなっています。

# グレイシーディープポケット

## 包装●

- ステンレススチール **S** **L** 1本
- X** 1本
- XP **X** 1本

歯周用キュレット グレイシー ディープポケット  
 一般医療機器 13B1X00155000072  
 歯周用キュレット XP グレイシー ディープポケット  
 一般医療機器 13B1X00155000256

## 〈製品コード〉

ブレードタイプ	ステンレススチール			XP
ハンドルタイプ	S	L	X	X
G1-2DP	0209B2180100	0209B2170100	0226B1170100	0234B0830010
G3-4DP	0209B2180150	0209B2170150	-	0234B0830020
G5-6DP	0209B2180200	0209B2170200	0226B1170200	0234B0830030
G7-8DP	0209B2180250	0209B2170250	0226B1170250	0234B0830040
G11-12DP	0209B2180300	0209B2170300	0226B1170300	0234B0830050
G13-14DP	-	0209B2170350	0226B1170350	0234B0830060
G15-16DP	0209B2180400	0209B2170400	0226B1170400	0234B0830070

ステンレススチール **X** XP



G1-2DP [前歯部]

[S L X][X]



G3-4DP [前歯部]

[S L -][X]



G5-6DP [前歯部]

[S L X][X]



G7-8DP [臼歯部]

[S L X][X]



G11-12DP [臼歯部 (近心)]

[S L X][X]



G13-14DP [臼歯部 (遠心)]

[ - L X][X]



G15-16DP [臼歯部 (近心)]

[S L X][X]



American Eagle  
 INSTRUMENTS®

# シックルスケーラー

包装●

- ステンレススチール **S** **L** 1本
- X** 1本
- XP **X** 1本
- XP Pro Thin **X** 1本

歯科用スケーラー スケーラー  
一般医療機器 13B1X00155000070  
歯科用スケーラー XP スケーラー  
一般医療機器 13B1X00155000263

〈製品コード〉

ブレードタイプ	ステンレススチール			XP	XP Pro Thin
ハンドルタイプ	S	L	X	X	X (XP Pro Thin タイプ)
H5-33	0209B2220050	0209B2210050	0226B1180050	0234B0840010	-
H6-7	0209B2220100	0209B2210100	0226B1180100	0234B0840020	-
J4-U5	0209B2220400	0209B2210400	0226B1180400	0234B0620000	-
M23	-	-	0234B0520000	0234B0630000	0138B1340010
ブラックジャック	-	-	-	0234B0610000	0138B1350010
204S	-	-	-	0234B0530000	-
204SD	-	-	-	0234B0540000	-



H5-33 [前歯部]

ステンレススチール **XP** **XP Pro Thin**

[S L X] [X] [-]



H6-7 [前歯部]

[S L X] [X] [-]



J4-U5 [前歯部]

[S L X] [X] [-]



M23 [全顎]

[— X] [X] [X]




ブラックジャック [全顎]

[—] [X] [X]



204S [臼歯部]

[—] [X] [-]

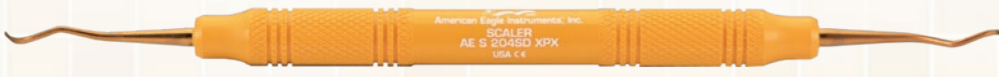

204SD [臼歯部 (遠心)]

[—] [X] [-]



XP XP Pro Thin

M23


全顎の歯肉縁上～縁下3mm以下の歯石除去や、チェック用として使用できるマルチタイプのスケーラーです。XP Pro Thinは、XPよりブレードが細いので、狭窄した歯間部や歯肉溝などに挿入しやすくなっています。



H6-7 ブラックジャック

ブラックジャック

適度な彎曲と角度があり、叢生部位の歯間部や臼歯部隣接面など、幅広く使用可能です。

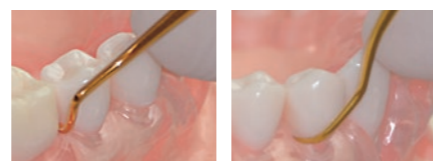

204S 204SD

204S/204SD

204SDは、204Sより第一ジャンクが長いので、臼歯部遠心にアクセスしやすくなっています。

# チタンインスツルメント

日本オリジナルの薄いブレード設計  
チタンアパットメントを傷つけにくいチタンブレードです。

包装●1本

※ハンドルは、Xハンドル(イーグルライト)のみです。

歯科用スケーラ チタンインスツルメント  
一般医療機器 13B1X00155000264



ネブラスカ ランガー N128-L5 [前歯部]



バーンハルト B5-6 [臼歯部]



ランガー L3-4 [臼歯部]



204S [臼歯部]

# ファイル ハーシュフェルト

包装●1本

※ハンドルは、Sハンドルのみです。

歯科用スケーラ ファイル ハーシュフェルト  
一般医療機器 13B1X00155000112





H3-7 [頬舌・唇舌面用]



H5-11 [近遠心用]

塊となった歯石を砕く  
ファイルタイプ。

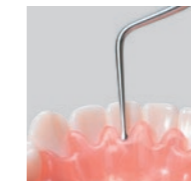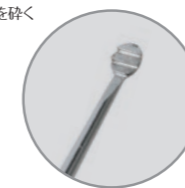

H3-7

H5-11