

石こう溶解材

ジーシー ロックリーン



義歯に付着している石こうを
漬けておくだけで迅速に除去 ——
技工作業の効率化に役立ちます。

石こう溶解材

ジーシー ロックリン


レジン床義歯からの石こう除去、鋳造体からの埋没材除去に威力を発揮する、発泡タイプの強力な石こう溶解材＝ロックリン。漬けておくだけで、わずかなすき間に入り込んだ石こうも残らず、溶かしてしまいますから、製作物を傷つける心配が無用。これまで、石こう除去に必要なだった手間と時間を、他の技工作業に有効に振り向けることができます。



包装… 液1本=1,000mL

溶解性能は抜群です。

例えばプラストーン(L)、ニュープラストーン、アドバストーン、フジロックなどの石こう、あるいはクリストバライト埋没材、パラベストなどの石こう系埋没材を、漬けておくだけでどんどん溶かすロックリン。その溶解性能は下のグラフに示す通り強力ですから、従来の石こう溶解材と比べ、短時間で処理を完了できます。

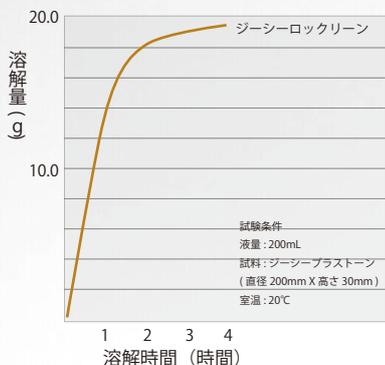

効果が見える発泡タイプです

ロックリンは、石こう溶かす際に泡を生じる発泡タイプですから石こうの溶ける状態が目で確認できます。新しい石こうを浸漬して、泡が出なくなったら液の交換時期と判断できます。



安全、そして経済的です。

ロックリンは歯科用レジンや金属に対してまったく安全。安心してご使用いただけます。なお、処理能力が高いだけでなく、泡で効力を確認できるため液を無駄に交換することはありませんので、大変経済的です。

〈ロックリンの主たる用途〉

- ・義歯に付着している石こうの除去
- ・鋳造体内面に付着している石こう系埋没材の除去
- ・印象用トレーに付着しているアルジネート印象材の除去
- ・印象用トレーに付着している模型用石こうの除去
- ・タウエルピン等に付着している模型用石こうの除去

参考文献

須藤哲也：新規開発急速加熱型石こう系埋没材の臨床応用可能性『アイデアベスト』によるレジンパターンの急速加熱で技工が変わる！, 190-199 歯科技工 2011.2

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

株式会社 ジーシー

東京都文京区3-3-2

DIG(デンタルインフォメーションセンター)

お客様窓口 0120-416480

受付時間9:00am.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祭日を除く)

http://www.gcdental.co.jp

支店

●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333

営業所

●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722

●東北(022)283-1751 ●九州(092)441-1286