

アメリカンイーグル 診査／歯周治療用

ハンドインstrument



Since 1921
100 years of Quality in Dental



American Eagle
INSTRUMENTS®




XP2シリーズでSRPをもっと軽やかに

シャープニングフリー

正しいブレード形状を維持できるため、変形によるリスクを最小限に抑えられます。さらに、器材メンテナンスの時間が短縮されることで、術者の負担軽減と診療の効率化にもつながります。

切れ味が持続する

刃部の仕上がりが滑らかで、刃こぼれが起りにくくなっています。余分な側方圧をかけずに操作でき、術者の手指への負担と患者さんの不快感を軽減します。

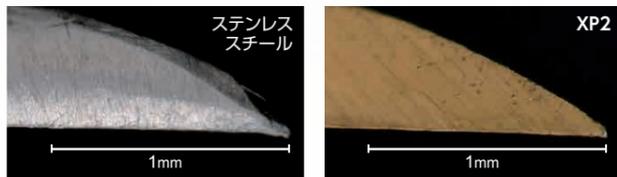

あなたにぴったりのパートナーを選択できる

	ステンレススチール	XP2	XP2 ProThin
材質	<p>「硬く鋭い鷲の爪」の意味を持つ、熱処理とアイステンパリングを施した特殊なステンレス合金です。シャープな切れ味が持続し、高い耐久性と耐蝕性を備えています。</p> <p>シャープニングが必要</p>	<p>XP2シリーズ</p> <p>SQUARED Technology (研磨技術)とプラズマフュージョン(特殊加工)により、滑らかで耐久性が高く、シャープニング直後のような切れ味が持続します。</p> <p>シャープニングフリー ※XP2シリーズはシャープニングを行うことができません。</p>	<p>XP2 ProThin</p> <p>滑らかで耐久性が高く、シャープニング直後のような切れ味が持続します。</p> <p>シャープニングフリー ※XP2シリーズはシャープニングを行うことができません。</p>
ブレード幅	<p>10%減</p>	<p>10%減</p>	<p>10%減</p>
ハンドル	<p>S 1/4インチ Sハンドル</p> <p>L 5/16インチ Lハンドル</p> <p>X 3/8インチ Xハンドル* (イェグルライト)</p>	<p>X 3/8インチ Xハンドル* (イェグルライト)</p>	<p>X 3/8インチ Xハンドル* (イェグルライト ProThin タイプ)</p>
使用場面	<p>多量に付着した歯石や硬い歯石の除去に</p>	<p>超音波スケーラー後の仕上げやSRPに</p>	<p>SPTやメンテナンス時の少量の歯石の除去に</p>

SURE GRIP HANDLE


ハンドルには、フラットな3本リングとファインカットが施されており、濡れたグローブで握っても滑りにくく、正確な作業を行えます。

* Xハンドルは形態別に色調が決まっています。

3つの形状



開口量が少ないケースには

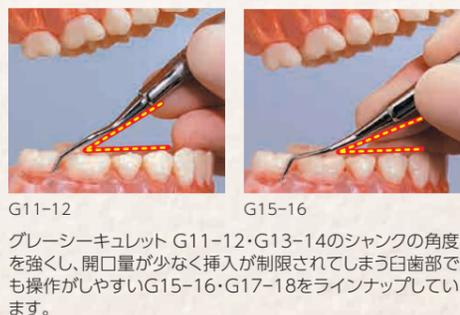

グレイシーキュレット

包装 ●

ステンレススチール S L 1本
X 1本

XP2 X 1本

歯周用キュレット グレイシー キュレット
一般医療機器 13B1X00155000071

歯周用キュレット XP2 グレイシー キュレット
一般医療機器 13B1X00155000321

〈製品コード〉

ブレードタイプ	ステンレススチール			XP2
	S	L	X	X
ハンドルタイプ				
G1-2	70009634	70009623	70010360	70017852
G3-4	-	70009624	70010361	70017853
G5-6	70009636	70009625	70010362	70017854
G7-8	-	70009626	70010363	70017855
G9-10	70009638	70009627	70010364	70017856
G11-12	-	70009628	70010365	70017857
G13-14	70009641	70009630	70010366	70017858
G15-16	70009642	70009631	70010367	70017859
G17-18	70009644	70009633	70010368	70017860



グレイシーアクセス

包装●

- ステンレススチール **S** **L** 1本
- X** 1本
- XP2 **X** 1本
- XP2 ProThin **X** 1本

歯周用キュレット グレイシー アクセス
 一般医療機器 13B1X00155000073
 歯周用キュレット XP2 グレイシー アクセス
 一般医療機器 13B1X00155000319

〈製品コード〉

ブレードタイプ	ステンレススチール			XP2	XP2 ProThin
ハンドルタイプ	S	L	X	X	X (XP2 ProThin タイプ)
GA00-0	70009653	70009645	70010369	70017863	-
GA1-2	-	70009646	70010370	70017864	70017871
GA3-4	70009655	70009647	70010371	70017865	-
GA5-6	70009656	70009648	70010372	70017866	-
GA7-8	70009657	70009649	70010373	70017867	70017872
GA11-12	-	70009650	70010374	70017868	-
GA13-14	70009659	70009651	70010375	70017869	70017873
GA15-16	-	70009652	70010376	70017870	70017874

GA00-0 [前歯部]

ステンレススチール XP2 XP2 ProThin

[S L X][X][-]

GA1-2 [前歯部]

[- L X][X][X]

GA3-4 [前歯部]

[S L X][X][-]

GA5-6 [前歯部]

[S L X][X][-]

GA7-8 [臼歯部]

[S L X][X][X]

GA11-12 [臼歯部(近心)]

[- L X][X][-]

GA13-14 [臼歯部(遠心)]

[S L X][X][X]

GA15-16 [臼歯部(近心)]

[- L X][X][X]

GA00-0

小さなブレードとまっすぐな第一シャングにより、深くて狭い下顎前歯部根面や、垂直性の歯周ポケットでも操作しやすくなっています。

グレイシーディープポケット

包装●

- ステンレススチール **S** **L** 1本
- X** 1本
- XP2 **X** 1本

歯周用キュレット グレイシー ディープポケット
 一般医療機器 13B1X00155000072
 歯周用キュレット XP2 グレイシー ディープポケット
 一般医療機器 13B1X00155000320

〈製品コード〉

ブレードタイプ	ステンレススチール			XP2
ハンドルタイプ	S	L	X	X
G1-2DP	-	70009661	70010377	70017875
G3-4DP	70009669	70009662	-	70017876
G5-6DP	70009670	70009663	70010379	70017877
G7-8DP	70009671	70009664	70010380	70017878
G11-12DP	70009672	70009665	70010381	70017879
G13-14DP	-	70009666	70010382	70017880
G15-16DP	70009674	70009667	70010383	70017881

G1-2DP [前歯部]

ステンレススチール XP2

[- L X][X]

G3-4DP [前歯部]

[S L -][X]

G5-6DP [前歯部]

[S L X][X]

G7-8DP [臼歯部]

[S L X][X]

G11-12DP [臼歯部(近心)]

[S L X][X]

G13-14DP [臼歯部(遠心)]

[- L X][X]

G15-16DP [臼歯部(近心)]

[S L X][X]



シックルスケーラー

包装●

- ステンレススチール **L** 1本
- X** 1本
- XP2 **X** 1本
- XP2 ProThin **X** 1本

歯科用スケーラー スケーラー
一般医療機器 13B1X00155000070
歯科用スケーラー XP2 スケーラー
一般医療機器 13B1X00155000318

《製品コード》

ブレードタイプ	ステンレススチール		XP2	XP2 ProThin
ハンドルタイプ	L	X	X	X (XP2 ProThin タイプ)
H5-33	70009683	70010384	70017896	-
H6-7	70009684	70010385	70017897	-
J4-U5	70009690	70010386	70017898	-
M23	-	70010792	70017899	70017900
ブラックジャック	-	-	70017895	70017901
204S	-	-	70017884	-
204SD	-	-	70017885	-

ステンレススチール XP2 XP2 ProThin

[L] [X] [X] [-]

[L] [X] [X] [-]

[L] [X] [X] [-]

[-] [X] [X] [X]

[-] [X] [X]

[-] [X] [-]

[-] [X] [-]



H5-33 [前歯部]



H6-7 [前歯部]



J4-U5 [前歯部]



M23 [全顎]



ブラックジャック [全顎]



204S [臼歯部]



204SD [臼歯部(遠心)]




XP2 XP2 ProThin

M23
全顎の歯肉縁上～縁下3mm以下の歯石除去や、チェック用として使用できるマルチタイプのスケーラーです。XP2 ProThinは、XP2よりブレードが細いので、狭窄した歯間部や歯肉溝などに挿入しやすくなっています。



H6-7との比較

ブラックジャック
適度な彎曲と角度があり、叢生部位の歯間部や臼歯部隣接面など、幅広く使用可能です。

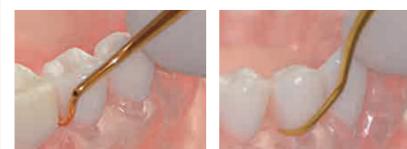

204S 204SD

204S/204SD
204SDは、204Sより第一ジャンクが長いので、臼歯部遠心にアクセスしやすくなっています。

チタンインスツルメント

日本オリジナルの薄いブレード設計

チタンアバットメントを傷つけないチタンブレードです。

※チタンインスツルメントはシャープニングを行うことができません。

包装●1本

※ハンドルは、Xハンドル(イグレルイト)のみです。

歯科用スケーラー チタンインスツルメント
一般医療機器 13B1X00155000264



ネブラスカ ランガー N128-L5 [前歯部]



バーンハルト B5-6 [臼歯部]



ランガー L3-4 [臼歯部]



204S [臼歯部]

ファイル ハーシュフェルト

大きな塊となった歯石や硬い歯石を細かく砕く

滑沢になった歯石を粗造化することもできます。

包装●1本

※ハンドルは、Sハンドルのみです。

歯科用スケーラー ファイル ハーシュフェルト
一般医療機器 13B1X00155000112



H3-7 [頬舌・唇舌面用]



H5-11 [近遠心用]



ファイルタイプ

H3-7

H5-11

側方圧を加えながら、引くストロークで操作します。

プローブ

包装●1本

歯周ポケットプローブ プローブ
一般医療機器 13B1X00155000049



(ブラック)WHOB



(イエロー)12Y



(ブラック)12B



(ブラック)N2B

エキスプローラー

包装●

3 1本

17-3 1本

(両頭) 11-12/ (両頭) 11-12DP 1本

歯科用探針 エクスプローラー

一般医療機器 13B1X00155000046



3



17-3




(両頭) 11-12



(両頭) 11-12DP

歯周治療に
おすすめ

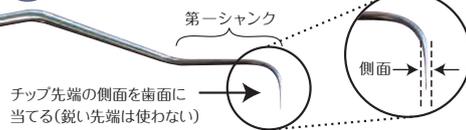

11-12

G11-12と同じ形態で、1本で全頰の根面全体を探知できるので、根面の歯石探知やチェックにおすすめです。Xハンドルのため軽く、触知した感覚が伝わりやすい設計になっています。

関連製品



テストスティック
包装●1本入、6本入



シャープニングストーン
包装●1函:1個

※オートクレーブ滅菌(140℃以下)、薬液消毒可能
※XP2シリーズ・チタンインスツルメントはシャープニング不要




インスツルメントカセット10本用
種類●分割式、蝶番式

包装●1函:1個
※製品にインスツルメントは含まれておりません。

別売

インスツルメントカセット10本用 交換用ラバー
包装●1セット:6個

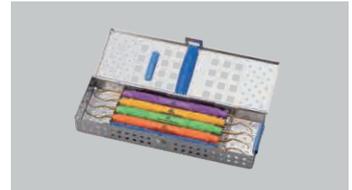

AEインスツルメント用カセット
包装●1函:1個

※インスツルメントを5本収納できます。
※製品にインスツルメントは含まれておりません。

インスツルメントは、刃部の損傷や破折を防ぐため、カセットに入れて洗浄(超音波・ウォッシャーディスインフェクター)、滅菌を行ってください。

※掲載情報は2026年2月現在のものです。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。
※会社名、製品名称等は各社の商標または登録商標です。

ご使用に際しては、必ず製品の電子添文をお読みください。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 株式会社 ジーシー
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区蓮沼町76番1号

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)
<https://www.gc.dental/japan/>

支店
●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333
営業所
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722
●東北(022)785-8040 ●九州(092)441-1286

iPhoneもAndroidも
App Store Google Play
どちらもコチラのQRでOK!

ジーシー
公式アプリ

