

# スリムライト

歯科重合用光照射器

GC



コンパクトなのに  
ハイパワー



歯科重合用光照射器

スリムライト

包装●一式: 本体 1個、アイガード 1個、充電器 1個、ACアダプタ 1個

光源	2波長タイプLEDモジュール (青色LED、紫色LED)
波長域	390~480nm
最大光強度	2,000mW/cm <sup>2</sup>
電源電圧	ハンドピース DC5V (リチウムイオン電池 DC3.6V) ACアダプタ AC100V 50/60Hz
バッテリー	リチウムイオン電池
充電時間	約3時間
光照射時間	30分 (フル充電した新品の場合)
寸法	ハンドピース φ25mm×高さ 235mm 充電器 φ93mm×高さ 66mm
質量	ハンドピース 140g 充電器 200g

## 別売



G-ライト プリマ/スリムライト 衛生カバー(50枚)  
包装●1函



アイガード  
包装●1個


歯科重合用光照射器 スリムライト  
一般医療機器 13B1X00155000308

# ハイパワーでスピーディーに重合

最大  
2000mW/cm<sup>2</sup>

## ●硬化深度


- Lモード 1回照射
- Hモード 2回照射
- Ramp upモード 1回照射

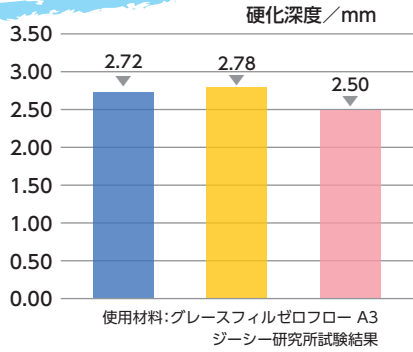

モード	光照射時間
High H	2,000mW/cm <sup>2</sup> で3秒間
Low L	700mW/cm <sup>2</sup> で10秒間
Ramp up	Lowモードで3秒 → Highモードで2秒

# 青と紫の2波長で、幅広い光重合材料に対応

## ●分光特性

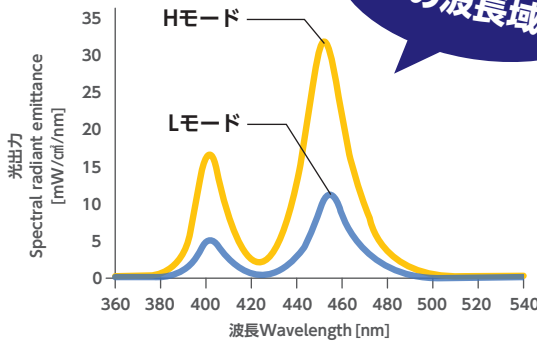


## 様々な光重合材料に

- ボンディング材
- コンポジットレジン
- グラスアイオノマーセメント (光重合型)
- レジンセメント
- 表面滑沢硬化材 など

# アプローチしやすい スリムヘッド

300度  
回転

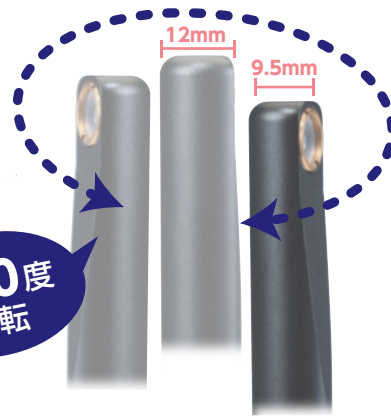

開口量が少ない  
ケースにも



電源コードを  
直接接続できる

充電切れでも使える

※電源コードを直接接続して充電することはできません。  
過放電を防ぐためご使用後は充電器で充電してください。

ほぼ原寸大



照射ボタン

モードボタン

モード表示

ご使用に際しては、必ず製品の電子添文をお読みください。

※掲載情報とジーシー研究所の参考データは2024年1月現在のものです。  
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。  
※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 株式会社 ジーシー  
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区蓮沼町 76番1号

カスタマーサービスセンター  
お客様窓口 ☎ 0120-416480  
受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祝日を除く)  
<https://www.gc.dental/japan/>

支店  
●東京 (03)3813-5751 ●大阪 (06)4790-7333  
営業所  
●北海道 (011)729-2130 ●名古屋 (052)757-5722  
●東北 (022)207-3370 ●九州 (092)441-1286

iPhoneもAndroidも



ジーシー  
公式アプリ



どちらもコチラのQRでOK!  
推奨OSバージョンはiOS:14.0以上、Android:10.0以上です。