



より良い適合精度と作業効率のためのマストアイテム 「支台歯模型用スペーサー」&「ワックス分離材」



支台歯模型用スペーサー


ジーシーシユアスペーサー

色調●2色=ホワイト、グレー
包装・価格●15mL 1本

薄い被膜、厚みの違いが分かる「半透明性」

1回塗りの厚みは約10 μ mと薄く、ケースに応じて重ね塗りを行うことで、自由に厚みをコントロールできます。

また、透明性を有した色調ですので、下地の透け具合でスペーサーの厚みを判断することができます。

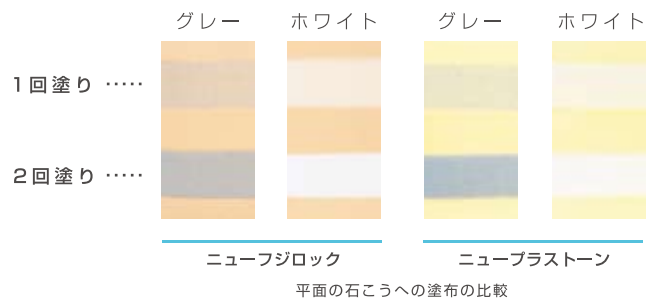

マージンの適合を高める「はがせる」タイプ

スペーサーはマージン部を除いて塗布し、はがしてから適合審査を行うことにより、内面の微細な変動をリリースし、しっかり最後まで修復物を支台歯に戻すことができます。



ワックス分離材

ジーシーシユアセップ

包装・価格●60mL 1本、筆(No.5) 1本

薄い被膜と最適な分離効果

サラっとした液状の分離材なので、薄い被膜を実現。また、マージン部は浮き上がることなくピッタリとフィットしながら、確実に石膏模型とワックスの分離ができるという最適なバランス特性を持っています。



株式会社 ジーシー

東京都板橋区蓮沼町76-1 〒174-8585

DIC (デンタルインフォメーションセンター)

お客様窓口 ☎0120-416480

受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祭日を除く)

<http://www.gcdental.co.jp>

支店

●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333

営業所

●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722

●東北(022)283-1751 ●九州(092)441-1286

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。