



Le concentré d'Expérience


Depuis 2012, GC Orthodontics commercialise les brackets auto-ligaturants de la société Japonaise TOMY Inc.

La dernière nouveauté est l'EXPERIENCE C mini, offrant tous les avantages de son prédécesseur l'EXPERIENCE C, remarquablement plus petit, apportant une réponse esthétique incomparable aux patients.

Fabriqués à partir de matériaux céramiques innovants (microparticules), il est fabriqué par injection (Ceramic Injection Molded).

Ces nouvelles technologies permettent de réaliser des brackets plus petits et de haute résistance aux chocs tout en donnant plus de confort aux patients.

Sa gorge usinée CNC donne l'expression parfaite du torque et améliore le glissement de l'arc, un clip interactif traité au Rhodium pour plus d'esthétisme, une gorge chanfreinée qui facilite l'insertion de l'arc et évite les arcs-boutements, une base anatomique mécanique qui suit la courbure de la dent et assure un collage sécurisé.

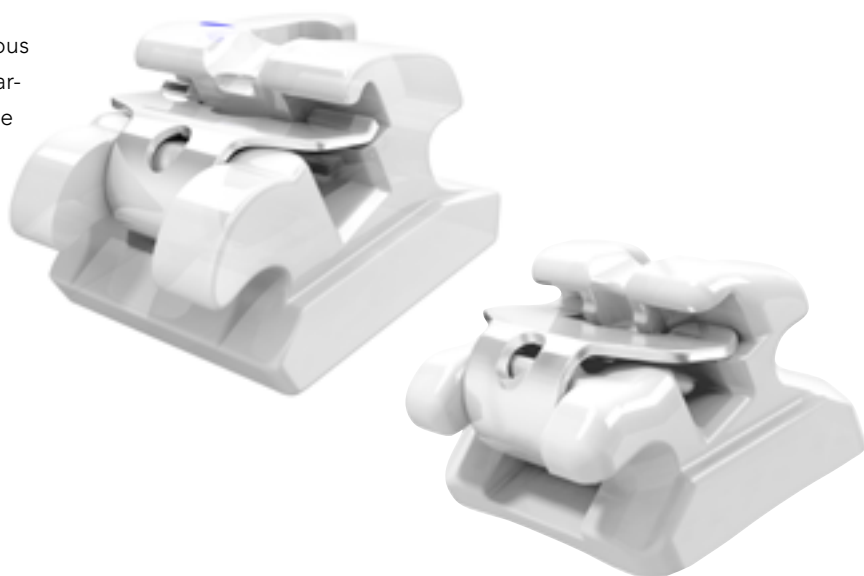

Avantages des brackets auto-ligaturants

- Meilleur confort pour le patient
- Temps réduit au fauteuil
- Rendez-vous espacés
- Plus de temps pour les phases de finition
- Meilleure hygiène bucco-dentaire

SL Product

Hi Aesthetic

EXPERIENCE™ mini ceramic

Mini bracket céramique auto-ligurant



passif



interactif



actif



Experts in Orthodontics

GC Orthodontics Europe GmbH

www.gcorthodontics.eu

EXPERIENCE mini ceramic

Ailettes arrondies


conçues pour limiter les interférences occlusales

Plusieurs méthodes d'ouverture

permettent d'ouvrir le clip sans déformation

Bracket Ceramic Injection Molding

uniformité, résistance, précision

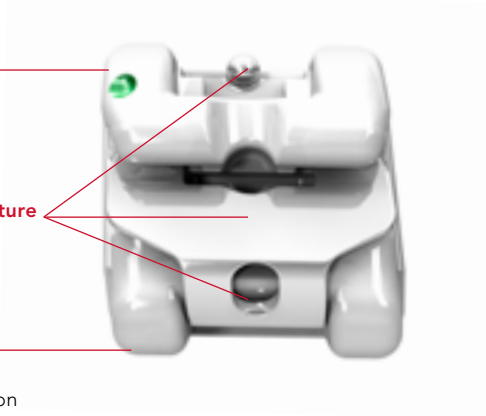

Gorge usinée CNC



Gorge triple chanfrein

facilite l'engagement de l'arc dans la gorge et évite les arcs-boutements

Torque dans la base



Base anatomique

suit la courbe de chaque dent

Base mécanique

résistance du collage maximum, possibilité de repositionner si nécessaire. Identification de la dent

Combinaison brackets/arcs idéale

Associer EXPERIENCE mini ceramic avec nos arcs NiTi à mémoire de forme **Initialloy**, **Bio-Active** et **Bio-Edge** améliore l'efficacité du traitement et le confort du patient., également disponibles en rhodium pour un rendu esthétique complet.



La gamme EXPERIENCE est fabriquée par TOMY Inc., un fabricant d'auto-ligaturants reconnu depuis l'an 2000. Les brackets EXPERIENCE sont disponibles en taille standard et en taille mini, métal, rhodium, et céramique, dans une large gamme de prescription.

Avantages du Bracket EXPERIENCE mini ceramic

Ce bracket bi-plot céramique auto-ligaturant allie esthétique et performance. Il reçoit un traitement rhodium sur son clip afin de le rendre plus homogène. Sa base 100 % mécanique, lui procure une résistance de collage et une dépose simplifiée.

Ces dispositifs médicaux de classe IIa sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Réservés aux professionnels de santé. Lire attentivement la notice ou les indications sur l'étiquette avant utilisation.

99-12FT-1300 - Rev00-06/2019



GC Orthodontics Europe GmbH

8, rue Benjamin Franklin · 94370 Sucy-en-Brie · France

Tél. : 01 77 45 65 61 · info.gco.france@gc.dental