

# EXPERIENCE™

mini metal & mini metal Rhodium

## Brackets mini métal esthétiques auto-ligaturants

**SL** Product


**Rh** Rhodium

**Crochet soudé au laser**  
(optionnel), malléable et se courbe

**Nouvelle méthode d'ouverture**  
simplifie l'ouverture sans déformation


**Bracket en Metal Injection Molded**  
uniformité, résistance, précision

**Ligne de grand axe**  
placement précis

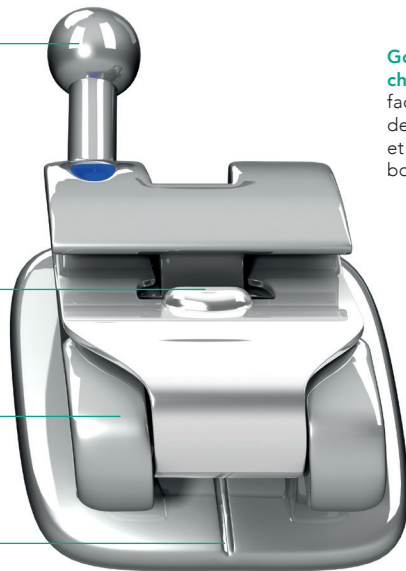

**Gorge triple chanfrein**  
facilite l'engagement de l'arc dans la gorge et évite les arcs boutements


Gorge usinée en CNC

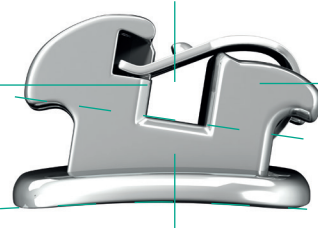

**Ailettes arrondies**  
conçues pour limiter les interférences occlusales

Torque dans la Base

**Base ID**  
marquage laser qui identifie la dent

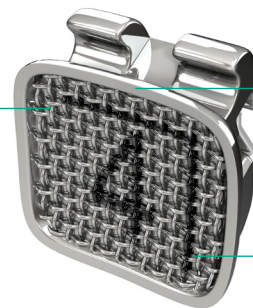

**Base anatomique**  
suit la courbe de chaque dent

**Base micro-sablée taille 80**, Meilleure résistance du collage



La gamme EXPERIENCE™ mini est plus petite que la version EXPERIENCE™. Cette diminution de taille a été obtenue par l'élimination du canal au travers duquel le clip de EXPERIENCE™ s'ouvre. On obtient donc un bracket avec un profil réduit et de nouveaux bénéfices tels que : sa taille réduite qui améliore le confort patient ainsi qu'un bracket plus esthétique.

Suite à l'injection de métal (MIM) ou de céramique (CIM) dans le moule, les EXPERIENCE™ reçoivent une opération additionnelle. Elle consiste à usiner la gorge de chaque bracket afin d'en assurer sa précision. Cette étape nommée CNC (Computer numerical controlled) est la seule à garantir la taille de la gorge, soit en .018" ou en .022". La fraise est changée tous les 1000 brackets pour assurer une constance de l'usinage. Les brackets expriment donc parfaitement le torque et l'angulation programmés dans chacun d'eux pour des résultats prévisibles.



Sans Rhodium



Avec Rhodium

## Caractéristiques des auto-ligaturants

- Confortable pour le patient
- Temps au fauteuil optimisé
- Rendez-vous simplifié
- Plus de temps pour les finitions
- Bonne hygiène dentaire
- Esthétique améliorée



Passif



Interactif



Actif

## Avantages du bracket

EXPERIENCE mini metal - Ce bracket bi-plot en métal auto-ligaturant allie esthétique et performance. Il a un profil plat et une taille réduite.

Il est disponible aussi en rhodium pour une esthétique améliorée. Sa base anatomique super mesh est micro-sablée, pour lui assurer un collage fiable et une dépose simplifiée.

Disponible en TGO, CCO, MBT Type, Roth Type et Extra Torque. ou 100 % passif (Damon Rx)



Nous recommandons l'usage de GC Ortho Connect™ pour le collage de vos brackets. One step system, le primer est dans le composite.



La gamme est fabriquée par TOMY Inc., un fabricant d'autoligaturants reconnu depuis l'an 2000.

## Combinaison brackets/arcs idéale

Associer EXPERIENCE avec nos arcs NiTi à mémoire de forme INITIALLOY, BIO-ACTIVE et BIO-EDGE. Disponibles aussi traités au rhodium pour un rendu esthétique complet.

